

# FICHA TÉCNICA

FT-PT-ASG-008 • Rev.19  
Vigente desde 02-10-24

Este documento es emitido por Eufar, está limitada su reproducción y es un DOCUMENTO NO CONTROLADO

# Desminfar

eufar  
LíneaDental

## DESMINERALIZANTE DE DENTINA Y ESMALTE



### Descripción y uso

- Es un gel de ácido fosfórico 37 %, que se utiliza cuando se requieren procesos de desmineralización en dentina y esmalte.
- Lavable.
- Desminfar proporciona un grabado de dentina en un tiempo de aplicación de 10 - 15 segundos y en esmalte de 15 - 20 segundos.

### Aspecto físico

Gel de color azul, ligero olor a ácido fosfórico, libre de partículas extrañas.

### Ingrediente activo

Ácido Fosfórico 37%.

### Presentación

Jeringa x 3 mL.  
Jeringa x 5 mL.  
Jeringa x 10 mL (12 g)  
Con 3 puntas aplicadoras.

### Vida útil

3 años.

### Riesgo

Ila

### Condiciones de almacenamiento

Manténgase bien tapado, en sitio fresco, protegido de la luz y lejos del alcance de los niños.

### Observación

Uso profesional odontológico.

### Precauciones


- No refrigerar.
- Evite el contacto con piel y mucosas; Si se presenta contacto, lavar inmediatamente.

### Registros Sanitarios

Reg. (COL.) INVIMA 2019DM-0004764-R1

Reg. (PER.) DM2486E

Reg. (NIC.) II04-270921-8980

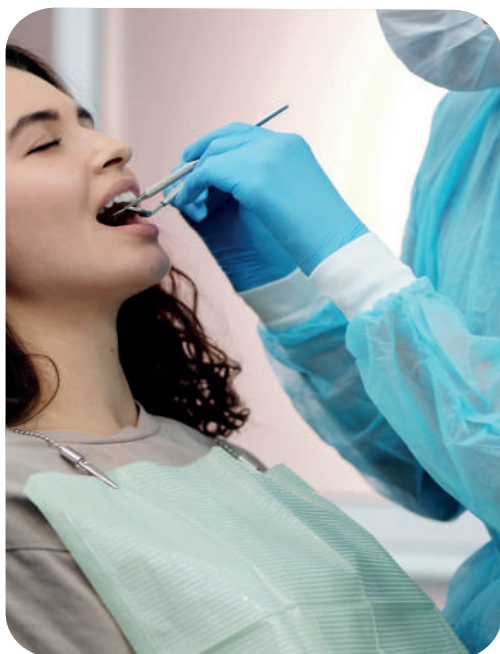

Contáctanos

✉ [ventas@eufar.com](mailto:ventas@eufar.com)

☎ (+57) 304 462 8755